



Hvordan oppdatere fra vår hjemmeside:

Gå inn på vår hjemme side:

<http://www.opusdental.com/no/support/nedlastninger/oppdateringer/>

Før du oppdaterer:

Påse at din pc/server/hovedmaskin tilfredsstiller Opus Systemers tekniske minimumskrav!


Påse at backup er tatt FØR du starter nedlasting av oppdateringen.

Påse at Opus Dental er lukket på ALLE pcer.

Sett deg på hovedmaskinen/server.

Klikk på den filen du ønsker å laste ned (venstre klikk)

Du vil da få opp dette dialogvinduet:

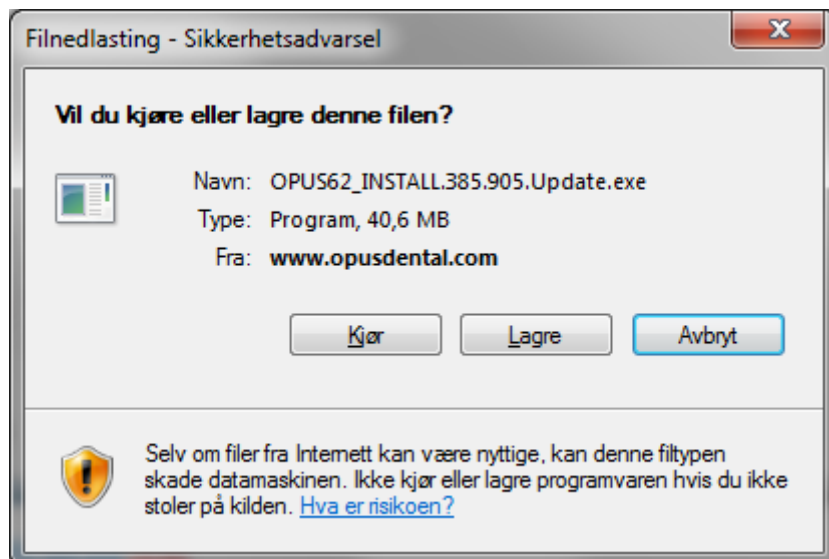





- For deg som har INTERNETT på jobben og vil laste rett ned på pcen: Klikk **Kjør**.
- For deg som skal lagre filen på en **minnepinne**: Klikk **Lagre** >> Finn minnepinnen i vinduet som åpner seg >> Klikk **Lagre**
- For deg som skal brenne filen på en **cd**: Klikk **Lagre** >> Finn et egnet sted på din pc, for eksempel Skrivebord. Selve brenneprosessen vil variere fra pc til pc. Hør med din tekniker.




Når du klikker **KJØR** kommer dette bildet >> Klikk **Neste**

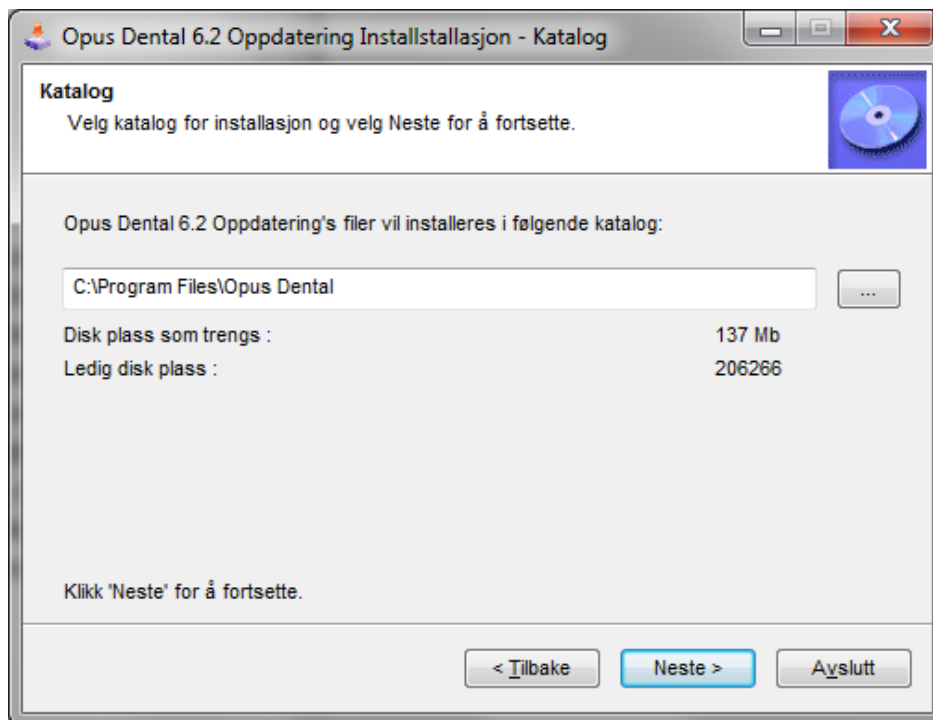

Klikk **Neste**

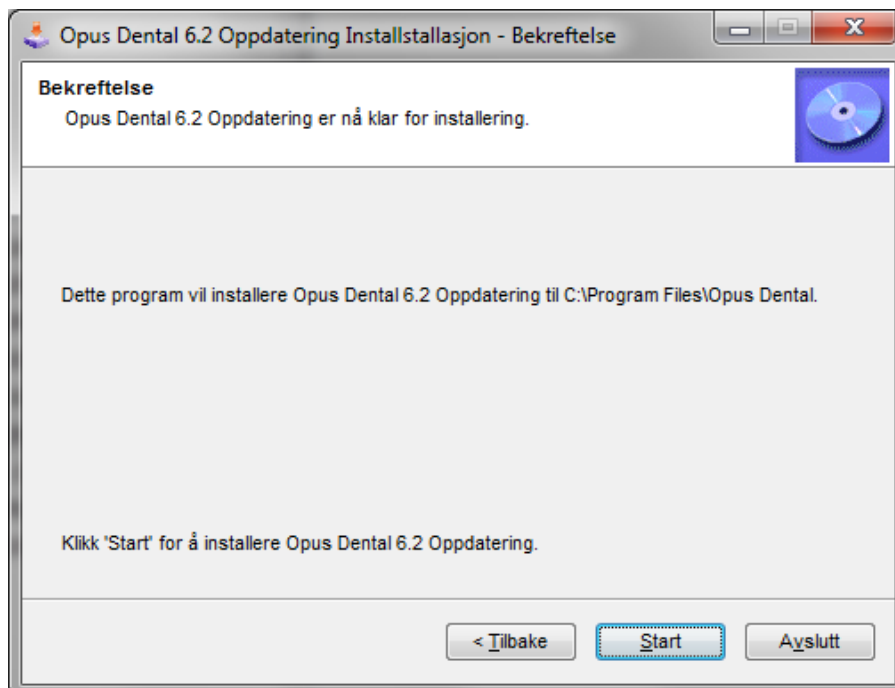


Klikk **Start**

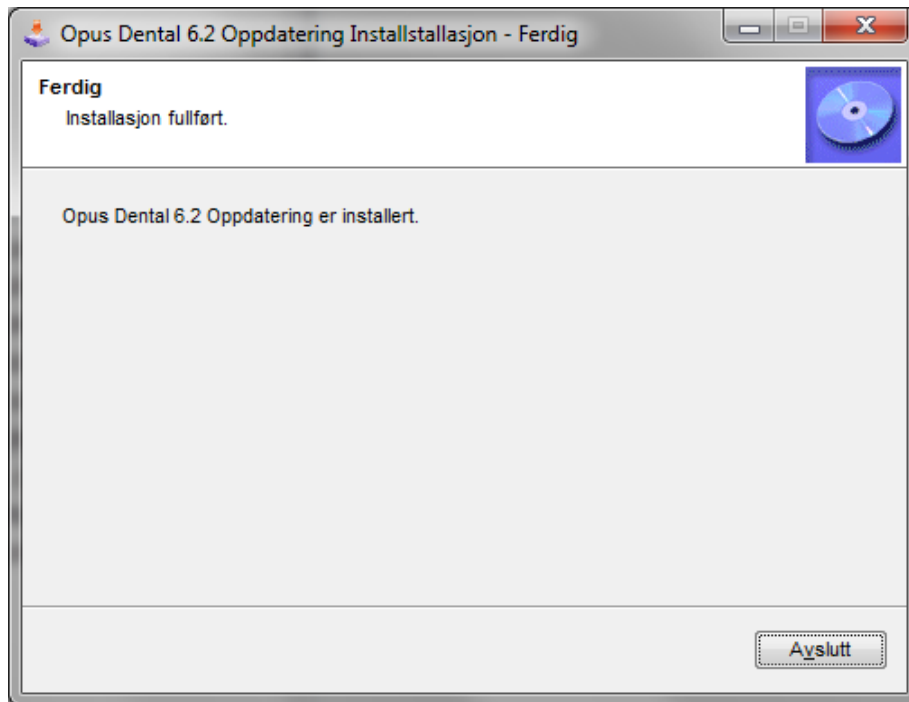


Klikk **Avslutt**

Så åpner du Opus Dental igjen på vanlig måte.

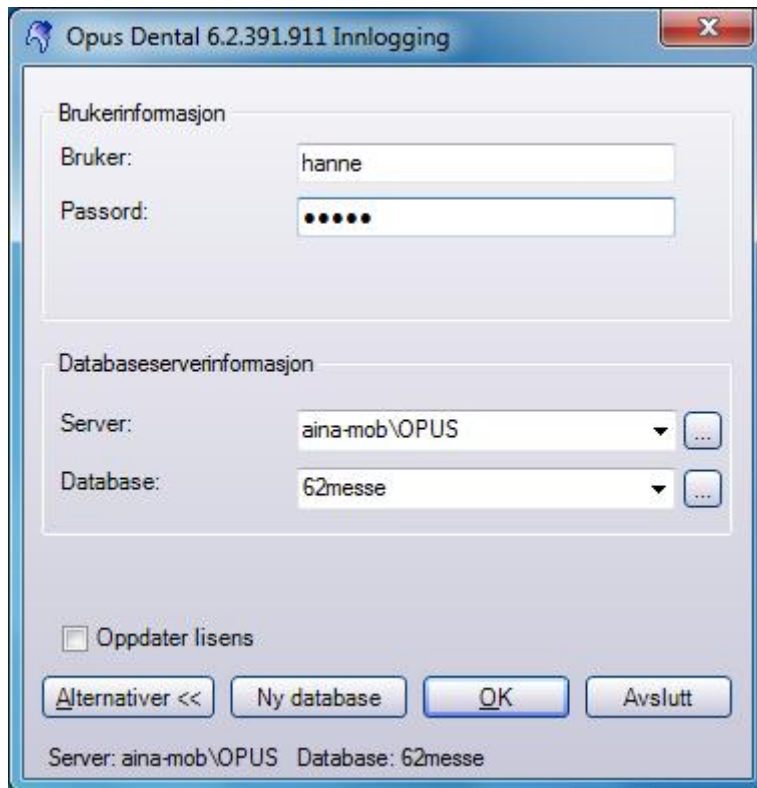

Du vil da få opp denne innloggingen. Skriv inn passord >> Klikk **OK**

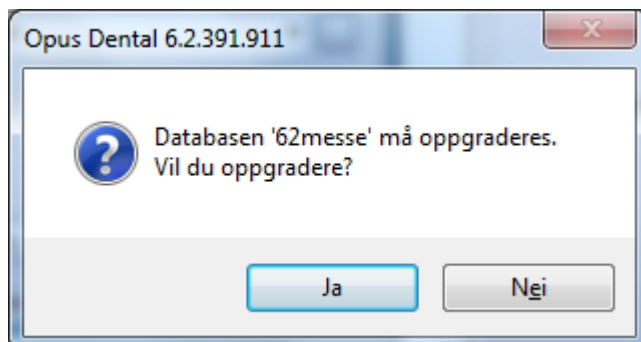

Klikk **Ja** på at du ønsker å oppgradere databasen



Server login

Autentisering

SQL Server

Windows

Brukerinformasjon

Brukernavn: sa

Passord:

OK Avbryt

Skriv inn **passord** >> Klikk **OK**

Hvis du får opp en feilmelding som sier at "sa" ikke er databaseeier så har du skrevet inn feil passord. Har du SQL Server 2005 er passordet **Opus2005**. Har du SQL Server 2008 er passordet **Opus2008** (hvis ingen har vært inne å endret dette på server!)



Server login

Autentisering

SQL Server

Windows

Brukerinformasjon

Brukernavn: OPUS\\aina

Passord:

OK Avbryt

Gjør så det samme på alle de andre pcene på klinikken som har Opus Dental..