

Opus SQL Server 2014 Express asennusohje

Johdanto

Opus SQL Server 2014 on asennusohjelma, joka asentaa Microsoft SQL Server 2014 Express -ohjelman Opus Dental -ohjelmistolle suositeltujen asetusten mukaisesti. Tavoitteena on tehdä Opus Dental -palvelinasennuksesta mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista.

Asennusohjelma myös tarkistaa tärkeimmät asennusvaatimukset ennen asennuksen käynnistymistä.

Asennusohjelma käynnistää komentoikkunan, joka ohjaa asennusta. Kaikki virheilmoitukset joita mahdollisesti esiintyy asennuksen aikana tallennetaan lokitiedostoihin asennuskansiossa.

On tärkeää, että asennusta ei missään tapauksessa keskeytetä kesken kaiken, sillä tämä saattaa pahimmassa tapauksessa aiheuttaa koko Windows käyttöjärjestelmän vaurioitumisen.

Asennusvaatimukset

Asennusohjelma tarkistaa, että seuraavat ohjelmat on asennettu palvelimelle:

.Net 3.5. SP1

Asennusohjelma vaatii tämän version toimiakseen

.Net 4.0

SQL Server 2014 vaatii tämän version

PowerShell 2.0

Microsoft käyttää PowerShell -ohjelmaa SQL Server 2014 Express -asennukseen. Musta komentoikkuna, joka avautuu kun asennus käynnistetään on PowerShell.

Opus instanssi

Mikäli tietokoneelle on asennettu aikaisempi versio Opus palvelimesta, se tulee poistaa manuaalisesti ennen SQL Server 2014:n asennusta. Joskus käy niin, että ohjelmiston poistaminen ei poista kaikkea informaatiota Windowsista, jolloin tarkistusohjelma havaitsee aikaisemmin asennetun Opus instanssin. Jos asennusohjelma varoittaa olemassaolevasta Opus instanssista, tarkista huolellisesti että se on todella poistettu, ja sen jälkeen voit ajaa asennusohjelman normaalisti.

Käyttäjätilien valvonta (UAC) ja virustorjuntaohjelmistot

Käyttäjätilien valvonta ja virustorjuntaohjelmistot suositellaan kytkemään pois päältä asennuksen ajaksi.

Tietokoneen nimi

Suosittelemme, että tietokoneen nimeä ei vaihdettaisi Opus SQL Server 2014 asennuksen jälkeen.


Asennus

Opus SQL Server 2014 Express asennusohjelma on pakattu itsepurkautuvaan tiedostoon, joka on nimeltään **OpusSQLServer2014Express_x64.exe**

Tuplaklikkaa pakattua tiedostoa ja pura se valitsemaasi kansioon.

Käynnistä asennusohjelma klikkaamalla tiedostoa **OpusSQL2014.exe** hiiren oikealla painikkeella ja valitse **Suorita järjestelmänvalvojana** (Run as administrator). Odota, että ohjelma tekee tarvittavat tarkistukset.

Kun asennusvaatimukset on tarkistettu, komentoikkuna avautuu:

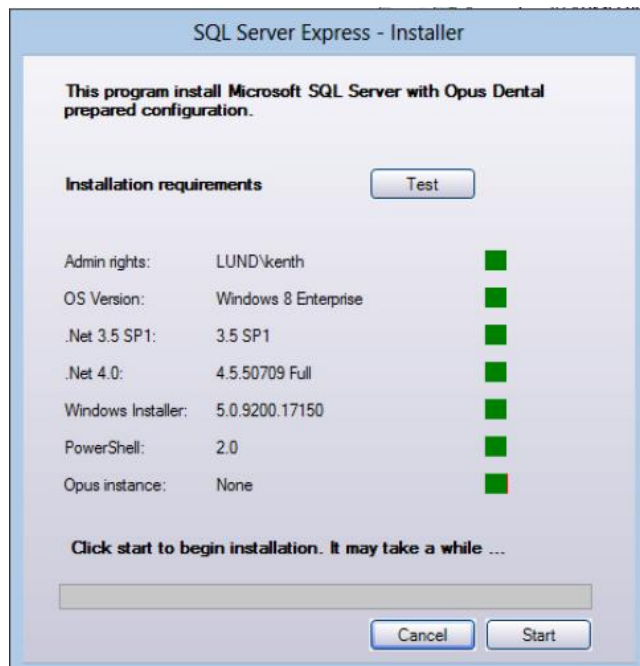


Jos joku vaatimuksista ei täyty, on siinä punainen neliö vihreän sijaan. Asenna puuttuvat ohjelmat. Asennusohjelmat voit hakea Microsoftin internet sivuilta.

Voit tehdä uuden tarkistuksen klikkaamalla painiketta **Test**.

Kun kaikki on kunnossa, voit käynnistää asennuksen klikkaamalla Start. **Odota että asennus on valmis tai päättyy virheilmoitukseen. Älä keskeytä asennusta!**

Asennus on valmis

Kun asennus on valmis, näytetään seuraava viesti:

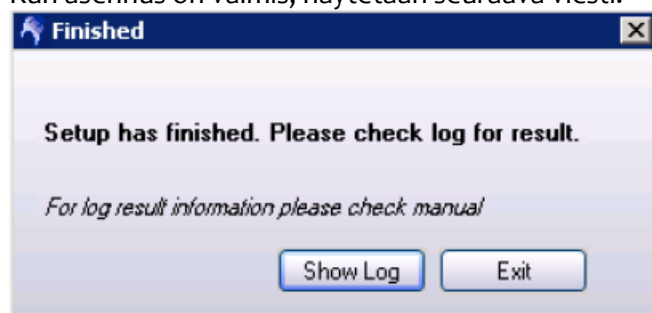

Tarkista lokitiedostot

Kaikki mahdolliset ilmoitukset kirjataan asennuksen aikana lokitiedostoon, joten on **tärkeää tarkistaa asennuksen tulos lokitiedostosta!** Klikkaa **Show Log** ja tarkista että kaikki on kunnossa. Jos asennus ei onnistunut, lokitiedostosta yleensä selviää mikä meni vikaan.

Lisätietoja virheilmoituksista löytyy Microsoftin internet sivulta.

Microsoft hoitaa SLQ Server 2014 -ohjelmiston ohjelmistotuen.